



キャビネット取扱説明書

●品番 MRE04BE

各部名称

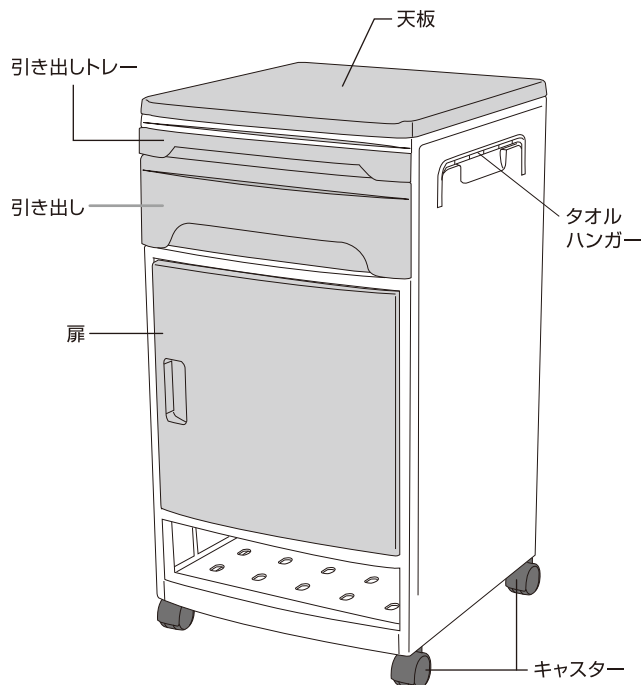

(引き出しなどを開けた状態)

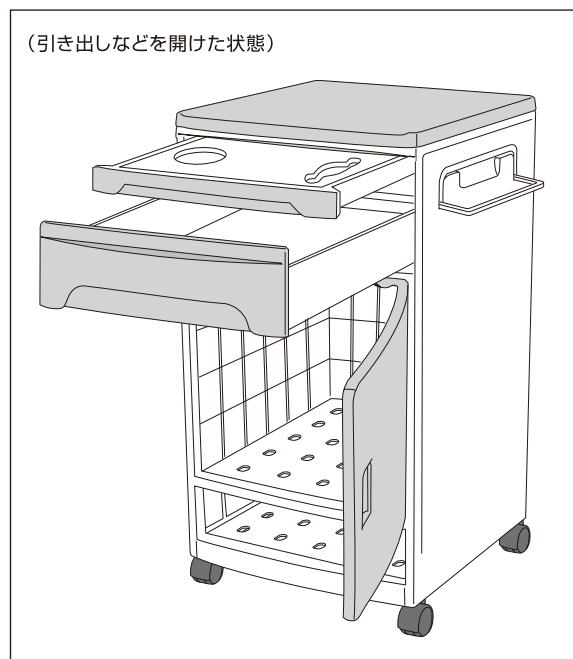

お手入れの方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。

その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。

最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。



注意事項



注意

- 変形・破損・転倒の恐れがあるので上面に20kg以上のものを置かないでください。
- 踏み台がわりに使用しないでください。落下・転倒してケガをする恐れがあります
- 引き出しトレイには重量物を置かないでください。また、もたれ掛かたりしないでください。
- タオル掛けを引っ張らないでください。

仕様

- サイズ：幅46cm、奥行48cm、高さ86cm
- 重量：14kg
- 耐重量：20kg

開発・製造元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 埼玉 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX.0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp

ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレスの設計、製造
および付帯サービスにて取得