

# SUPER KAIJOMAT K02

## スーパー介助マットK02

- ・介護保険貸与対象品/体位変換器、床ずれ防止用具
- ・オーバーレイタイプ(ベースマットレス必要)
- ・床ずれ発生リスク度/軽度～中等度



### 圧迫力の低減と自然な寝返りを追求した自動体位変換エアマットレス

#### 自動体位変換機能

設定した体位変換を自動で行います。ゆっくりとした動きで傾くので、船酔いを起こさず眠りを妨げることもありません。上向き時は完全なフラットになり、介護や乗り降りも容易にできます。

#### 寝返りや体位変換のしやすさと、優れた体圧分散性を両立

底着き・沈み込み・ふわふわ感を100:50の圧切替で解消。寝返りや体位変換をしやすくします。


#### 耳障りな音を解消、眠りを妨げない静かなエアマットレス

一体型構造マットレスは内部の空気移動がスムーズ。“シュー・シュー”という耳障りな空気移動音がなく、眠りを妨げません。


#### 緊急エア抜き(ジョイントバルブ)

マット足元にあるジョイントバルブを外すことで、すばやくマット内のエアを抜くことができます。

- ◎体位変換動作:左⇄上⇄右
- ◎各体位保持時間:15分
- ◎傾き角度:3段階(8°、15°、20°)

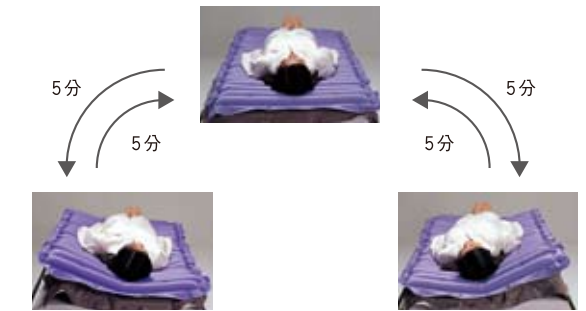

■自動体位変換機能

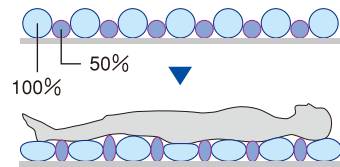

■マット部の動作

TAISコード:00054-000001

| 品番       | マットサイズ(cm) |     |    |           | 重量(kg) | 標準小売価格(本体価格)  |
|----------|------------|-----|----|-----------|--------|---------------|
|          | 幅          | 長さ  | 厚さ | 体位変換時最大厚さ |        |               |
| MSK-0200 | 88         | 185 | 7  | 22        | 3.4    | ¥135,000(非課税) |

<素材> ●マット=ナイロンタフタ <ポンプ仕様> ●サイズ:幅26×高さ11×奥行20cm ●重量:2.3kg ●電力:AC100V 50/60Hz 6W ●圧切替時間:7分 ●電気代目安:1.2円/日 ※15°自動体位変換で算出

PAT.

ポンプ2年間保証