

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために
「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、
おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する 車いす用クッション

Power Cushion

パワークッション



ノーマルタイプ
(安定重視)



ハイトタイプ
(座圧重視)

NEW

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援：座位保持装置完成用部品

対象者 車いすや座位の姿勢で長時間過ごす人、プッシュアップが必要な人

PAT.P


体圧分散性能

3Dフィットエアセルが大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように支え、体圧を分散させます




自動体圧調整

誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します

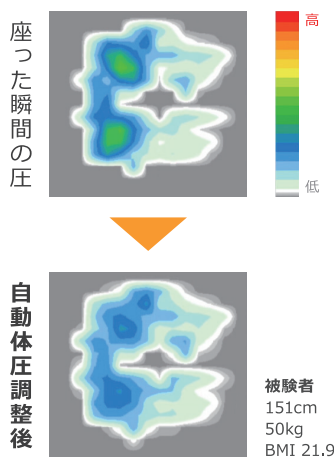

除圧性能

3Dフィットエアセルの圧切替によって坐骨部や尾骨部の除圧を自動的に行います
プッシュアップと同様の効果です (15分ごと)

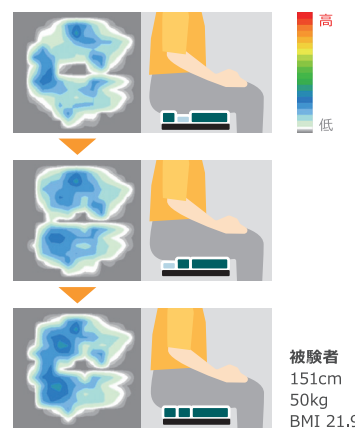

パワーバンク (充電式バッテリー)




電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます

パワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです
事故や故障の原因となるため「高温下での放置」や「劣化したパワーバンクの使用」はしないでください

操作パネル

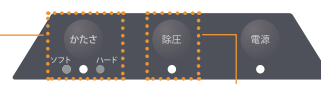

【かたさ調整】

最適な圧力に自動で調整します
必要に応じて3段階でかたさを選ぶことができます

【除圧】

「静止型」と「圧切替型 (除圧)」の選択ができます

| 介護保険 | | 汎用性のあるサイズのクッションをご希望の場合 | | | | | | | |
|---------|--------|------------------------|----------|----|----|-----|---------|--------------|---------|
| タイプ | 品番 | TAISコード | サイズ (cm) | | | | 重量 (kg) | バッテリー持ち時間の目安 | |
| | | | 幅 | 長さ | 厚さ | 最厚部 | | 活動性が低い | 活動性が高い |
| ノーマルタイプ | MPWCL | 00054-000439 | 38 | 40 | 8 | 11 | 1.2 | 連続約50時間 | 連続約15時間 |
| ハイトタイプ | MPWCHL | 00054-000616 | | | 11 | 14 | | 連続約35時間 | 連続約11時間 |

| 障がい者総合支援 | | 個別の車いすにあうクッションをご希望の場合 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| <ul style="list-style-type: none"> ●品番等の詳細はお問い合わせください ●幅・長さはサイズ表を参考に、お使いの車いすに合うサイズをお選びください ●クッションタグのカラーは、イエロー/グレーの2色から選べます ●受注生産のため納品まで2週間程度かかります | | | | | | | | | |
| | | | サイズ | | 長さ | | | | |
| | | | cm | | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| | | | 幅 | 32 | S | SL | | | |
| | | | | 34 | | M | | SL | |
| | | | | 36 | | | L | | |
| | | | | 38 | | | | L | |
| | | | 40 | | | | | LL | |

<素材>

- エアセル：ウレタンフィルム
- 底着き防止フォーム：ウレタンフォーム
- クッションカバー表面：ポリエステル
- クッションカバー裏面：ナイロン (滑り止め加工)
- インナー保護カバー：ウレタン合皮

<充電方式>
AC100VまたはUSB/DC5V

価格

オープン価格



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得