

Wheeliy homecare

ウィーリイ ホームケア



PAT.P

介護保険福祉用具貸与品：車いす

障がい者総合支援・補装具

対象者 自力で立てない人
立つことはできても一定の距離を歩けない人

困りごと 車いす座位時のお尻の痛みや姿勢の崩れ



利用者様の多くは痛みを回避しようとして、姿勢を崩されます
仙骨座り、片側への傾き姿勢……右のような光景はありませんか？
もちろん、ご家族は毎回姿勢を直すのにご苦労されています



・車いすからの転落
・食事のしづらさ
・身体の変形や痛み など、さらなる困りごとの原因に…



解決！

『ウィーリイ ホームケア』がお尻の痛みを軽減し、姿勢の崩れを防ぎます


ウィーリイ ホームケア は、お尻も背中も体圧分散性の高いクッションを標準装備！

座面クッションに十分な厚み(10cm)を持たせることで座位時のお尻の痛みを軽減します
また、背中部分も体圧分散性の高い、心地よいクッションにしています



車いすの片側にもたれている人、足を片側に寄せて座っている人、仙骨座り(ずっこけ座り)の人、お尻の痛みを取り除こうとしてこのような姿勢をとられているケースが多々あります
車いすに座った際の「お尻への圧迫力を減らす対策」は重要です

ウィーリイ座面クッションの体圧分散性

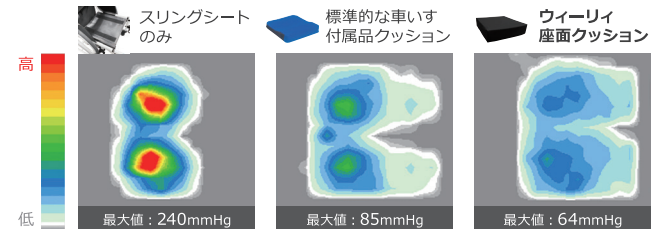

被験者：156cm 53kg BMI 21.8

フットレスト



スイングアウトや取り外しが可能です

オプション

立位駐車ブレーキ

介護者がかがまず立ったままブレーキ操作ができます
前方にかがむ苦しい姿勢をとらずに済みます



立位駐車ブレーキ



介助ブレーキ

バンド式の介助ブレーキです



タイプ	ウィーリイ ホームケア			
	オプションなし	+立位駐車ブレーキ	+介助ブレーキ	+立位駐車ブレーキ +介助ブレーキ
品番	MWHEHC	MWHEHCRB	MWHEHCSB	MWHEHCSR
TAISコード	00054-000617	00054-000638	00054-000618	00054-000639

サイズ：全長=100.5cm、全高=86cm、全幅=60cm、前座高=38cm、後座高=35cm、シート幅=40cm、シート奥行=40cm、アームサポート高=26.5cm、バックサポート高=43cm、フット長=25cm、折りたたみ幅=34cm キヤスタサイズ：5in ノーパンクタイヤサイズ：24in 重量：15.7kg 最大使用者体重：100kg サポートカラー：イエロー

※ 標準装備品 ・座面クッション ・トランスファーボード ・前方駐車ブレーキ

開発・販売・製造
医療・福祉機器 総合メーカー
株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health
東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために
「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、
おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する 車いす用クッション

Power Cushion

パワークッション



介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援：座位保持装置完成用部品

体圧分散性能

3Dフィットエアセルが大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように支え、体圧を分散させます



内部構造



清拭しやすいインナー保護カバーにより、臭いや汚れを長期間防ぎます

自動体圧調整


誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します

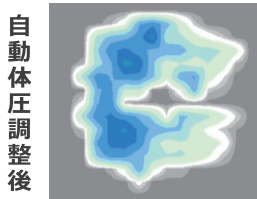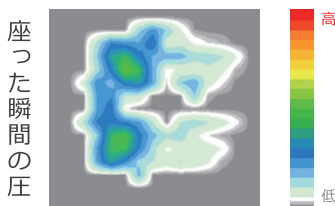

被験者
151cm
50kg
BMI 21.9

除圧性能

3Dフィットエアセルの圧切替によって坐骨部や尾骨部の除圧を自動的に行います
プッシュアップと同様の効果です (15分ごと)

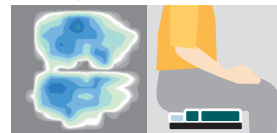

被験者
151cm
50kg
BMI 21.9

パワーバンク (充電式バッテリー)




電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます

パワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです
事故や故障の原因となるため「高温下での放置」や「劣化したパワーバンクの使用」はしないでください

操作パネル

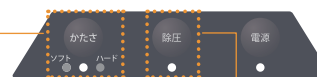

【かたさ調整】

最適な圧力に自動で調整します
必要に応じて3段階でかたさを
選ぶことができます

【除圧】

「静止型」と「圧切替型 (除圧)」の
選択ができます

タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)				重量 (kg)	バッテリー持ち時間の目安	
			幅	長さ	厚さ	最厚部		活動性が低い	活動性が高い
ノーマルタイプ	MPWCL	00054-000439	38	40	8	11	1.2	連続約50時間	連続約15時間
ハイタイプ	MPWCHL	00054-000616	38	40	11	14		連続約35時間	連続約11時間

Wheeliy homecare + Power Cushion

ウィーリー ホームケア + パワークッション セット



※ セット購入の場合は標準装備のクッションは除きます

タイプ	ウィーリー ホームケア								
	オプションなし			+立位駐車ブレーキ		+介助ブレーキ		+立位駐車ブレーキ +介助ブレーキ	
	品番/TAISコード	品番	TAISコード	品番	TAISコード	品番	TAISコード	品番	TAISコード
パワークッション	ノーマルタイプ	MWHEHCPWC	00054-000619	MWHEHCRBPWC	00054-000640	MWHEHCSBPWC	00054-000620	MWHEHCSRBPWC	00054-000641
	ハイタイプ	MWHEHCPWCH	00054-000621	MWHEHCRBPWCH	00054-000642	MWHEHCSBPWCH	00054-000622	MWHEHCSRBPWCH	00054-000643

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得