



Wheeliy

ウィーリィ

PAT.P

- 介護保険福祉用具貸与品：車いす
- 障がい者総合支援・補装具

ウィーリィの対象者と選定理由

ウィーリィの対象者

1. 下肢障がいや病気などで歩けない人 + 外出意欲が高い人 内から外へ
2. 普段は杖や歩行車を使っているが、長い距離の歩行は難しい人 + 外出意欲が高い人 内から外へ

ウィーリィの選定理由

利用者様が、外出がしたい、長い距離の移動がしたいと考えている
 外出：買い物、家族での外出、お孫さんのイベント、通院、旅行・・・

1. 体力面の課題と解決策

杖や歩行車で長い距離を移動するには、時間がかかる、家族に迷惑がかかる、疲れるが課題です
 よって長い距離の移動には車いすが最適です

2. 精神面の課題と解決策

外出時には大勢の人達に自分の姿を見られます
 利用者様は、身だしなみに関心をされ、また素敵な車いすなら、外出の抵抗感は減るでしょう

3. 疲れない車いすの特性

長い距離の移動で、車いすに求められる特性は、走行安定性(直進性+ひと漕ぎの走行量)と軽量です
 利用者様もご家族も楽であるべきです

Wheeliy は走行安定性に優れた車いすです！

独自のRS構造(RUNNING-STABILITY)により、折りたたみ車と固定車の優れた部分を併せ持つ車いすを実現しました

車体構造の種類	収納性 ・保管のしやすさ ・車への積み込み	走行安定性 ・まっすぐ進む(直進性) ・ひと漕ぎの走行量大きい
折りたたみ車	○	× たわみ・ガタツキが原因
固定車	× 一般的に車輪を外して収納	○
Wheeliy	○	○

RS構造



■リジッドバー

走行時のガタつきを減らし、直進性とひと漕ぎの走行量を向上させます

かがまず立ったまま使える立位駐車ブレーキ！

これまでの駐車ブレーキは
 介助者が前かがみになって操作するため
 腰痛などストレスとなっていました

かがまず立ったまま、手をおろした位置にも
 ブレーキを追加することで楽に操作できるようになりました



立位駐車ブレーキ



前かがみになって操作



かがまずに操作可能！

<ウィーリィ仕様>

- ダークグレー 品番：MWHEPSGY22、TAISコード：00054-000453
- ホワイト 品番：MWHEPSWY22、TAISコード：00054-000454

キャストサイズ：5in、タイヤサイズ：24in、前座高：45cm、後座高：40cm、シート幅：40cm
 シート奥行：43cm、アームサポート高：27cm、バックサポート高：40cm、フット長：33cm～
 全長：80cm、全高：85cm、全幅：59cm、折りたたみ幅：35cm、重量：14.0kg
 最大使用者体重：100kg、サポートカラー：イエロー

※ 標準装備品 ・立位駐車ブレーキ ・トランスファーボード ・転倒防止バー

オプション

介助ブレーキ

品番：MWHE-B170



押す人が手で操作するためのブレーキです

価格：265,000 円 (非課税)

価格：13,200 円 (税抜価格 12,000 円)

その他の特徴

外に出たくなる素敵な『デザイン』



こだわりのデザインで、内にこもらず外に出ようという気持ちを後押しします
人に見てもらいたくなるような、素敵なクルマイスです



トランスファーボードの滑り特性向上

標準装備のトランスファーボードがより使いやすくなりました！
滑り特性を向上することで、さらに移乗しやすくなり、従来の「抱きかかえ移乗」による過度な密着や腰痛での心身の負担を軽減します



ウィーリイ関連品

※ 車いす付属品は車いす（非課税）と一緒に購入する場合は非課税となります

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する 車いす用クッション

Power Cushion

パワークッション

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援：座位保持装置完成用部品



体圧分散性能


3Dフィットエアセルが大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように支え、体圧を分散させます

内部構造




自動体圧調整

誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します

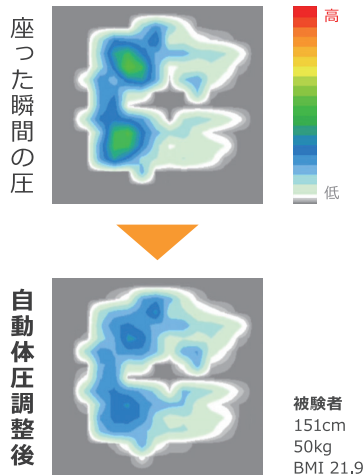

除圧性能

3Dフィットエアセルの圧切替によって坐骨部や尾骨部の除圧を自動的に行います
ブッシュアップと同様の効果です (15分ごと)

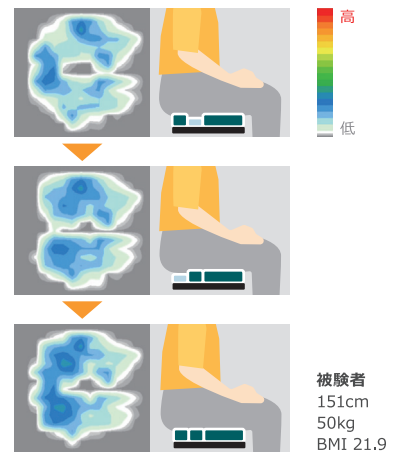

パワーバンク (充電式バッテリー)




電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます

パワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです
事故や故障の原因となるため「高温下での放置」や「劣化したパワーバンクの使用」はしないでください

操作パネル

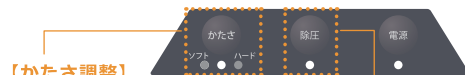

【かたさ調整】

最適な圧力に自動で調整します
必要に応じて3段階でかたさを
選ぶことができます

【除圧】

「静止型」と「圧切替型 (除圧)」の
選択ができます

タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)				重量 (kg)	バッテリー持ち時間の目安		価格
			幅	長さ	厚さ	最厚部		活動性が低い	活動性が高い	
ノーマルタイプ	MPWCL	00054-000439	38	40	8	11	1.2	連続約50時間	連続約15時間	オープン価格
ハイトタイプ	MPWCHL	00054-000616			11	14		連続約35時間	連続約11時間	

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの
設計、製造および付帯サービスにて取得