



Wheeliy | Wheeliy powerdrive

アタッチメント

※ 車いす付属品は車いす（非課税）と一緒に購入する場合は非課税となります

パワークッション

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援：座位保持装置完成用部品

「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減する車いす用クッション

体圧分散性能

大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように、体圧を分散させます。

自動体圧調整

誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します。

除圧性能

坐骨部や尾骨部の除圧を自動的にに行います。プッシュアップと同様の効果です。（15分ごと）




ノーマルタイプ
(安定重視)

ハイタイプ
(座圧重視)

PAT.P


【かたさ調整】

利用者様に最適な圧力に自動で調整します。必要に応じて3段階でかたさを選ぶことができます。

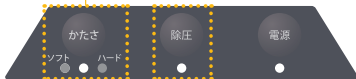

【除圧】

「静止型」と「圧切替型（除圧）」の選択ができます。

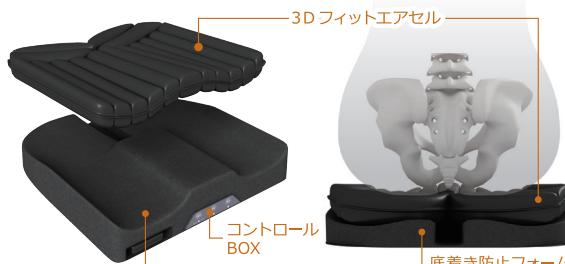

清拭しやすいインナー保護カバーにより、臭いや汚れを長期間防ぎます

電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます



※ 体型や使用条件によって持ち時間が前後します

タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)				重量 (kg)	バッテリー持ち時間の目安		価格
			幅	長さ	厚さ	最厚部		活動性が低い	活動性が高い	
ノーマルタイプ	MPWCL	00054-000439	38	40	8	11	1.2	連続約50時間	連続約15時間	オープン価格
ハイタイプ	MPWCHL	00054-000616	38	40	11	14		連続約35時間	連続約11時間	


● 素材：エアセル=ウレタンフィルム、底着き防止フォーム=ウレタンフォーム、クッションカバー表面=ポリエステル、クッションカバー裏面=ナイロン（滑り止め加工）、インナー保護カバー=ウレタン合皮 ● 充電方式：AC100VまたはUSB/DC5V

※ パワーバンク（充電式バッテリー）はリチウムイオン式です。事故や故障の原因となるため“高温下での放置”や“劣化したパワーバンクの使用”はしないでください。

Wheeliy 専用 クッション

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

座り心地がよく、座位を安定支持するウレタンフォーム製のクッションです。

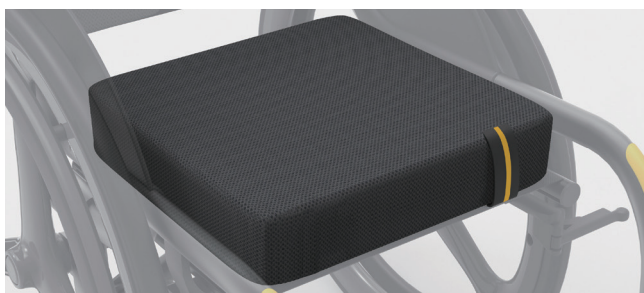

品番：MWHE-B1014043Y3 / TAISコード：00054-000457

- サイズ：幅40cm×長さ43cm×厚さ7cm ● 重量：800g
- 素材：クッション材=ウレタンフォーム、カバー表面=ポリエステル、カバー裏面=ナイロン（滑り止め加工）

価格：19,800 円（税抜価格 18,000 円）

Wheeliy 専用 バッグインバッグ

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

背もたれの収納スペースにぴったりで、簡単にすっと出し入れできるバッグインバッグです。



品番：MWHE-B500 / TAISコード：00054-000458

- インナーバッグサイズ：幅30cm×奥行16.5cm×高さ24.5cm
- アウターバッグサイズ：幅31cm×奥行18cm×高さ26cm
- 素材：ポリエステル他

価格：17,600 円（税抜価格 16,000 円）

