

「お知らせ機能」を搭載した 高機能エアマットレス

AMANDA

アマンダ



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者


寝たきりの人で、「認知症」により
身体異常時に意思表示ができず、見守りが必要な人

身体の細かい部分までフィットする 『体圧分散性能』

特殊なセルの形状により、身体の細かい部分までフィットし体圧を分散させます。


従来の
マットレス

マットレスが突っ張るため
体圧分散性能が落ちる

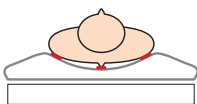

アマンダ


マットレスが身体に
フィットするため
体圧分散性能が高い

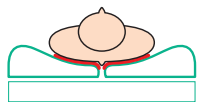

誰が寝ても安全・安心の 『自動体圧調整』


体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な
体圧分散になるように自動で調整します。

体圧調整前（寝た直後）

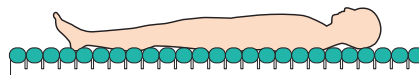


自動
調整

体圧調整後（数分後）

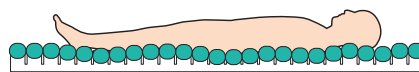

世界トップクラスの除圧性能を可能にした 『3D除圧』

従来のたて方向だけの除圧と異なり、たて～
よこ～傾きの3方向からの除圧を行います。

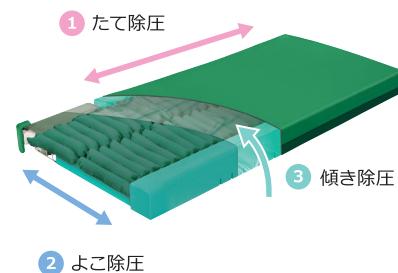

ベッドまわりの安全・安心を追求した『お知らせ機能』

○ 苦しさによる大きな【体動】 ○ 不意の【はさまり】 ○ ベッドからの【ずり落ち】
など、日中・夜間に利用者様の身体の異常をマットレス内蔵のセンサーが感知すると、専用のワイヤレス受信機を通じてお知らせします。
センサーを内蔵しているので、利用者様は違和感なく使用でき、断線による故障もありません。



受信機は
持ち運び
可能



すぐに
対応

ベッド上での動き（体動・起上り・離床）
をマットレス内蔵のセンサーが感知



ワイヤレス受信機が
チャイムでお知らせ

品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MAMA83	00054-000435	83	193	14	10.0	83cm程度	レギュラー	234,740円 (税抜価格213,400円)
MAMA91	00054-000436	91	193	14	11.0	91cm程度	レギュラー	
MAMA83S	00054-000437	83	182	14	9.5	83cm程度	ショート	
MAMA91S	00054-000438	91	182	14	10.5	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：エアセル=ウレタンフィルム、
フィッティング層・底着き防止層=
高耐久ウレタンフォーム
- インナー保護フィルム：ウレタン
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

