

「見守り機能」を搭載した 高機能エアマットレス

AMELIA

アメリア



対象者


寝たきりの方で、「認知症」や「せん妄」などにより
身体異常時に意思表示ができず、見守りが必要な人

身体の細かい部分までフィットする
『体圧分散性能』

特殊なセルの形状により、身体の細かい部分までフィットし体圧を分散させます

従来のマットレス


マットレスが
突っ張るため
体圧分散性能が落ちる

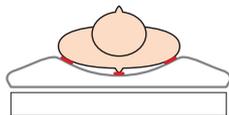


誰が寝ても安全・安心の
『自動体圧調整』

体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な
体圧分散になるように自動で調整します

体圧調整前（寝た直後）

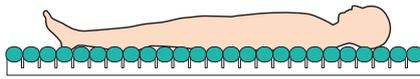


体圧調整後（数分後）

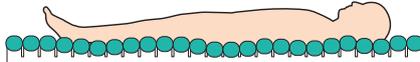


アメリア

マットレスが身体に
フィットするため
体圧分散性能が高い

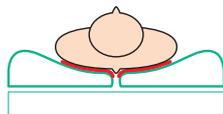

従来品よりもさらに除圧性能を高めた
『3D除圧』

従来のはたて方向だけの除圧と異なり、たて〜
よこ〜傾きの3方向からの除圧を行います

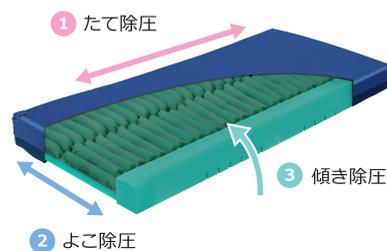

ベッドまわりの安全・安心を追求した『見守り機能』

- 苦しさによる大きな【体動】
- 不意の【はさまり】
- ベッドからの【ずり落ち】

など、日中・夜間に患者様・入居者様の身体の異常をマットレス内蔵のセンサーが感知すると、ナースコールを通じてお知らせします
センサーを内蔵しているので、患者様・入居者様は違和感なく使用でき、断線による故障もありません



すぐに
対応

ベッド上での動き（体動・起上り・離床）を内蔵のセンサーが感知



異常をナースコールでお知らせ

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ	
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ
MELA83	83	193	14	10.0	83cm程度	レギュラー
MELA91	91	193	14	11.0	91cm程度	レギュラー

<素材>

- マット部：エアセル=ウレタンフィルム、
フィット層・底つき防止層=高耐久ポリウレタンフォーム
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

