


吸水スピードが速く表面はサラサラ
寝床内のむれを解消する機能シート

HIGH-PERFORMANCE SHEET

ハイパー除湿シート

対象者

発汗量が多い人
失禁の不安がある人

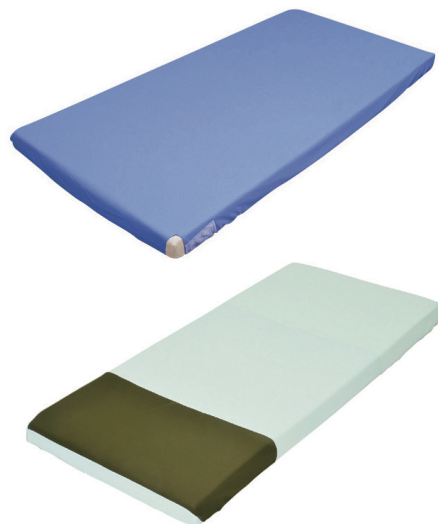


1. 身体にかかるずれ力を抑制

シート表面の摩擦係数を小さくすることで、外力（ベッド背上げ時、体位変換やポジション移動の際など）による身体へのずれ力の伝達を抑えます。

2. 汗などの水分を吸水して拡散するのでいつも快適

シート表面についた水分を中間層の超極細繊維が素早く吸収し、横方向に拡散させます。吸収した水分は表面に戻らないので、いつもサラサラで快適です。

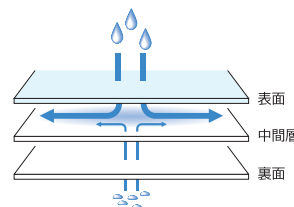


3. 伸縮性に優れた素材でしわがでにくい

不快な寝心地の原因となる「しわ」がでにくい素材を使用しています。

4. 丸洗い可能・乾燥機使用可能

丸洗いや乾燥機の使用が可能で衛生的・快適に使用できます。


吸水拡散タイプ

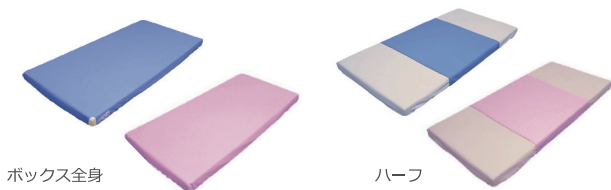

ボックス全身

ハーフ

吸水拡散+防水タイプ

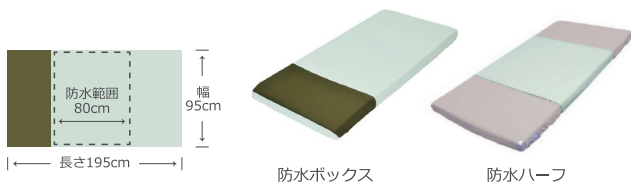

防水ボックス

防水ハーフ

種類	カラー	品番	サイズ(cm)		価格
			幅	長さ	
ボックス全身	ブルー	MHJBB	96	196	7,381円 (税抜価格6,710円)
	ピンク	MHJBP			
ハーフ	ブルー	MHJHB	140	90	3,630円 (税抜価格3,300円)
	ピンク	MHJHP			

<素材> ●ポリエステル

種類	カラー	品番	サイズ(cm)		価格
			幅	長さ	
防水ボックス	グリーン	MHBBG	95	195	9,922円 (税抜価格9,020円)
防水ハーフ		MHBHG	140	90	4,840円 (税抜価格4,400円)

<素材> ●防水ボックス：ポリエステル+ポリウレタン+ナイロン+綿
●防水ハーフ：ポリエステル+ポリウレタン

※ モルテン製の全てのマットレスに使用可能

※ 「オスカー」の体位変換モード設定中は全身サイズ（ボックス全身・防水ボックス）をご使用ください

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得