

長時間維持する優れた体圧分散性能を持つ
3層式ウレタンフォームマットレス

Nucky

ナッキー





介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者 一部介助が必要な人

PAT.P

優れた体圧分散性能


かたさの異なる高密度ウレタンフォームを3層構造にすることで、各種体位での優れた体圧分散性能を向上しています。

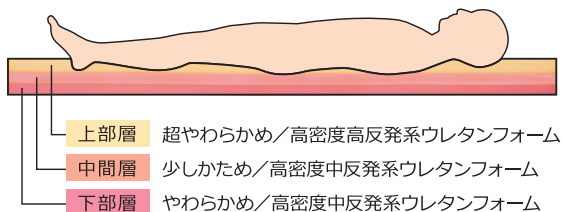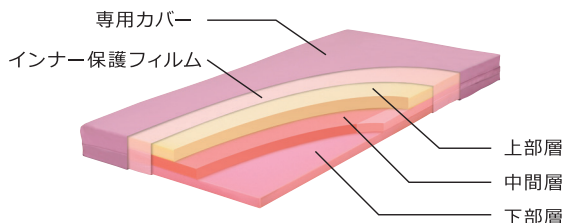

上部層	高反発系のやわらかい特殊ウレタンフォームで、心地良い感触と微細な部分までの体圧分散を実現
中間層	適度なかたさのウレタンフォームで、沈み込みすぎを防ぎ、さらに局所的な体圧分散性能を向上
下部層	中間層よりやわらかめのウレタンフォームで、荷重が集中したときの底着き感を低減し、体圧分散性能を向上

端座位の安定性

中間層の両側サイドにかためのウレタンフォームを組み込むことで、端座位の安定性を更に向上し、ずり落ちを対策しています。

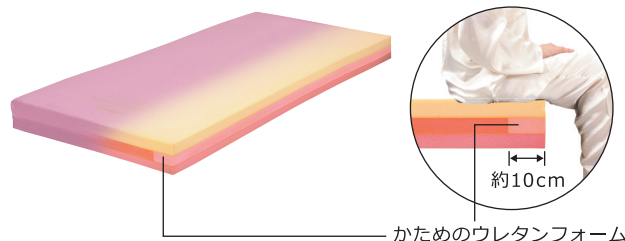

“へたり”にくい 特殊ウレタンフォーム


長期間使用による“へたり”が発生しにくい、高密度中～高反発系ウレタンフォームを使用しています。

“へたり”とは・・・

マットレスを長期間使用した場合に起こる劣化現象で、変形して元に戻らなくなり「体圧分散性能が低下」してしまいます。

安全で衛生的な環境のために

嘔吐、吐血、失禁、薬剤などの汚れが内部に浸透するのを防ぐことで、安全（感染）対策や衛生面（臭い）の対策につながります。マットレス表面に付着した汚れはアルコールなどで「清拭消毒」ができます。

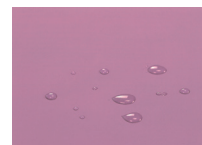

TAISコード：00054-000101

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MNC83	83	191	13	8.8	83cm程度	レギュラー	105,270円 (税抜価格95,700円)
MNC91	91	191	13	9.8	91cm程度	レギュラー	
MNC83S	83	180	13	8.3	83cm程度	ショート	
MNC91S	91	180	13	9.3	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：ウレタンフォーム
- インナー保護フィルム：EVA
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

