



快適な寝心地と動きやすさを探求した
静止型マットレス


Nussaw

ナッソー（防水・清拭消毒タイプ）

「ナッソー」は通常の静止型マットレスより厚さがあり、
特殊な構造により、患者・入居者様の快適な寝心地と動きやすさを探究しています
さらなる進化として、2024年にマットレスカバーをリニューアルし、
患者・入居者様とケア従事者様にとって、
より衛生的にご使用いただけるようになりました

マット：快適な寝心地と動きやすさ

高耐久ポリウレタンフォーム

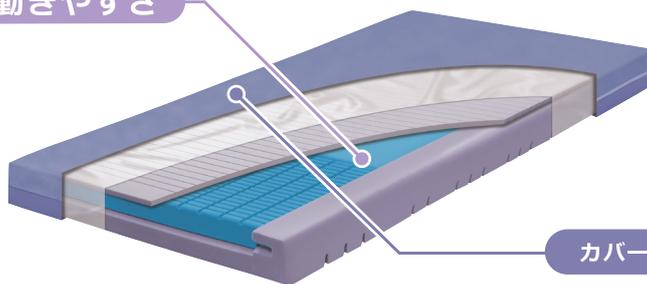


カバー：防水・臭い浸透軽減

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー


マット

快適な寝心地と動きやすさ（起き上がり・立ちあがり）

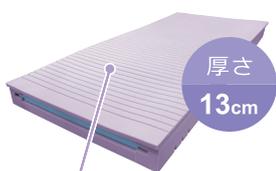

フィッティングフォーム

寝た瞬間のやさしい触感

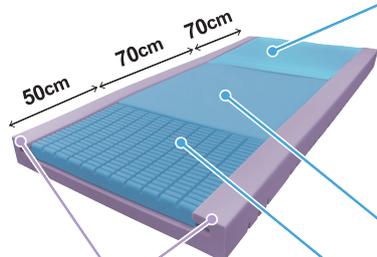

端座位フォーム

手の平をついての立ち上がりが容易

起き上がりフォーム

通常のマットレスと比べて硬めのフォームにより、手の平やひじをついた際に起き上がりやすくしています



起き上がりのしやすさ

起き上がりフォームは、滑りやすい「ズレ対策シート」で覆われています。ベッドの背上げ時には、ズレ対策シートが背中部分とのずれを軽減し、背中にかかる苦しい圧を対策します

おしりフォーム

おしりの過剰な沈み込みを防止 = 腰痛対策

足フォーム

細かいスリット加工で荷重を分散し足やかかるとかかる圧を低減


カバー（NEW）

マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減

カバーの厚さと素材

独自開発の TPU フィルム は、従来の合成皮革製カバーよりも厚さを8倍向上させました

フィルム厚さ（従来 20μ → 今回 170μ）で内部への臭いの浸透を軽減しました ※全周溶着式

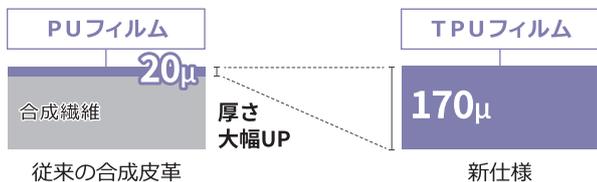


溶着式 - 止水ファスナー

通常品のファスナーは、縫製加工のため、内部に液体が浸透します

「溶着式 - 止水ファスナー」は、マットレス本体とファスナー部を溶着しているため、液体が内部へ侵入するのを軽減します



液体

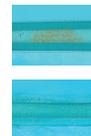

縫製式-通常ファスナー
（内部に侵入）

溶着式-止水ファスナー
（侵入なし）

| 品番 | マットサイズ (cm) | | | 重量 (kg) | 適合ベッドサイズ | |
|----------|-------------|-----|----|---------|----------|-------|
| | 幅 | 長さ | 厚さ | | 幅 | 長さ |
| MNUS1383 | 83 | 191 | 13 | 8.1 | 83cm程度 | レギュラー |
| MNUS1391 | 91 | 191 | 13 | 9.0 | 91cm程度 | レギュラー |

<素材>

- インナーマット：高耐久ポリウレタンフォーム
- ズレ対策シート：ナイロン
- カバー：熱可塑性ポリウレタン

