

「自動体位変換機能」と「3D除圧」でさらに進化した 高機能エアマットレス

OSCAR

オスカー (ハイブリッドタイプ)



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者 自分の力で寝返りができない人で、人による体位変換が受けられない人


PAT.

身体の細かい部分までフィットする『体圧分散性能』

特殊なセルの形状により、身体の細かい部分までフィットし体圧を分散させます。


従来の
マットレス

マットレスが突っ張るため
体圧分散性能が落ちる

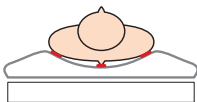

オスカー


マットレスが身体に
フィットするため
体圧分散性能が高い

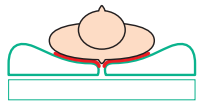

誰が寝ても安全・安心の『自動体圧調整』


体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な体圧分散になるように自動で調整します。

体圧調整前（寝た直後）

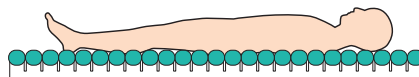


自動
調整

体圧調整後（数分後）

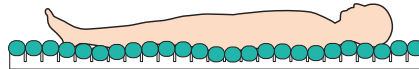

従来品よりもさらに除圧性能を高めた『3D除圧』

従来のたて方向だけの除圧と異なり、たて〜よこ〜傾きの3方向からの除圧を行います。

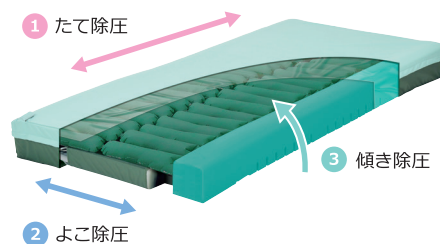

利用者様と介護者様にやさしい『自動体位変換機能』と『体位指定機能』

4つのポジショニングセルで人の手に近いやさしい体位変換を行います。

<自動体位変換機能>

自動体位変換は“仰臥位→側臥位→仰臥位”を一連の動きで行います。身体状況に合わせて体位変換の「保持時間」や「角度」などを設定できます。



左側臥位

仰臥位

右側臥位

<体位指定機能>

仰臥位や左右の側臥位だけではなく、「セミファウラー位」「ひざ上げ」に対応し、おむつ交換や口腔ケア、安楽姿勢など、目的に合わせて指定の体位に変換することができます。



セミファウラー位

ひざ上げ

TAISコード：00054-000137

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MOSC83	83	193	17	12.0	83cm程度	レギュラー	234,740円 (税抜価格213,400円)
MOSC91	91	193	17	13.5	91cm程度	レギュラー	
MOSC83S	83	182	17	11.5	83cm程度	ショート	
MOSC91S	91	182	17	13.0	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：エアセル=ウレタンフィルム、フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム
- インナー保護フィルム：ウレタン
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

