

「上敷きタイプ」の高機能エアマットレス

PRIME REVO

プライム レボ



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具


対象者 自分の力で寝返りができない人で、
人による体位変換が受けられる人

体圧分散性能

ツイストライン形状で、優れた体圧分散性能を実現しました。


従来の
マットレス

マットレスが突っ張るため
体圧分散性能が落ちる

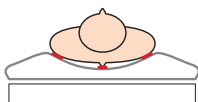

プライムレボ


マットレスが身体に
フィットするため
体圧分散性能が高い

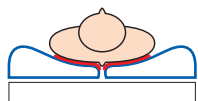


自動体圧調整

体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な体圧分散になるように自動で調整します。

体圧調整前(寝た直後)


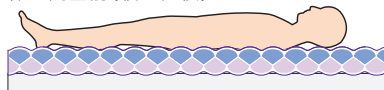


体圧調整後(数分後)

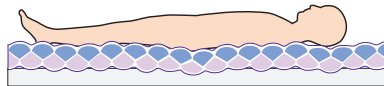

圧切替による除圧

寝心地のよさを持続させながら圧切替(除圧)を行います。身体の50%をマイクロエアセルで支え、残りの50%で除圧を行います。

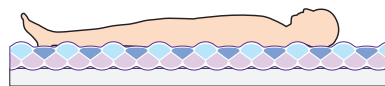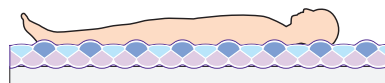

選べる『かたさ』と『除圧動作』

利用者様の身体状況などに合わせ、マットレスの『かたさ』と『除圧動作』を選ぶことができます。



かたさ

ソフト 標準 ハード

利用者様の好みや身体状況によって3段階で選択可能

除圧動作

静止型 圧切替型

除圧動作なし 除圧

リウマチなど除圧動作で痛みを訴えられる場合には、静止型マットレスとしても使用可能

<オーバーレイタイプ(ベースマットレス必要)> TAISコード：00054-000048

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MPRV83	83	191	10	3.8	83cm程度	レギュラー	147,620円 (税抜価格134,200円)
MPRV91	91	191	10	4.3	91cm程度	レギュラー	

<素材>

- マット部：ウレタンフィルム
- カバー：ウレタン合皮(制菌加工) + ナイロン(透湿性&防水性)