

「快適な寝心地と安定性を両立した」標準マットレス
快適・衛生タイプ

Ruflan CC

ルフラン CC



アウターカバー：除湿

吸水・拡散素材

除 湿 汗などの水分をすばやく吸収し、拡散させる機能

インナーカバー：防水・臭い浸透軽減

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

防 水 汚れても清拭消毒可能な特性

臭い浸透軽減 インナーのフィルムの厚み（通常品の8倍）
+ 溶着式-止水ファスナーの機能


マ ッ ト 部：快適な寝心地と安定性

高耐久ポリウレタンフォーム

選べる寝心地 かたさの異なるリバーシブル構造で、オモテ面ウラ面の選択が可能

寝心地と安定性の両立 2層構造により、快適な寝心地と寝返りや立ちあがりしやすい安定性を両立

“へたり”にくさ 特殊なウレタンフォームで、“へたり”がやや発生しにくい特性

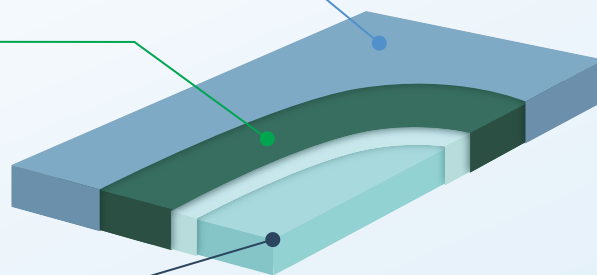

NEW

やさしい肌ざわり・サラサラ感 を提供する専用の除湿カバー

やさしい肌ざわり


厚みのある3層構造により、綿シーツとは異なる、やさしい肌ざわりを提供します

表面層：より細かく繊維を密集
中間層：極細繊維
裏面層：より細かく繊維を密集



水分吸収・拡散性 によるサラサラ感

カバー表面についた汗などの水分を中間層の超極細繊維が素早く吸収し、拡散させます
吸収した水分は表面層に戻りにくく、サラサラで快適です

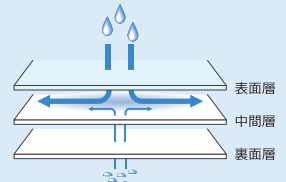


インナーカバー

マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減

インナーカバーの厚さと素材

独自開発のTPUフィルムは、従来の合成皮革製カバーよりも厚さを8倍向上させました


フィルム厚さ（従来 20μ → 今回 170μ）で内部への臭いの浸透を軽減しました ※全周溶着式

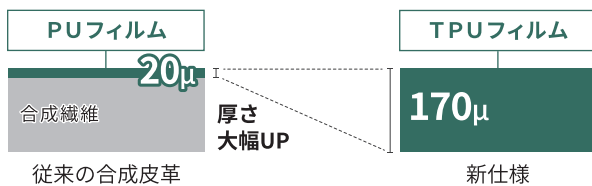

溶着式 - 止水ファスナー

一般的なファスナーは内部に液体が浸透します
止水ファスナーは内部に液体は浸透しませんが、縫製加工の場合、針穴から浸透します

溶着式 - 止水ファスナーは、液体が内部へ侵入するのを軽減します

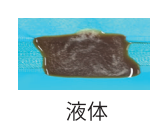


縫製式-通常ファスナー
(内部に侵入)
溶着式-止水ファスナー
(侵入なし)

マット部

快適な寝心地と安定性を両立

好みに合わせて選べる寝心地

かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です
やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分けることができます

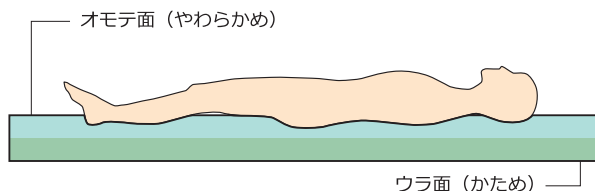

寝心地のよさと寝返りのしやすさ

身体を優しく支える上層と、しっかり支える下層の2層構造により、快適な寝心地と寝返りや立ちあがりしやすい安定性を両立しています

“へたり”にくさ

特殊なウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”をやや発生しにくくしています

製品名	品番	TAISコード	マットサイズ			重量
			幅	長さ	厚さ	
ルフラン CC	MRFCC1083	00054-000675	83	191	10	6.6
	MRFCC1091	00054-000676	91	191	10	7.1
	MRFCC1083S	00054-000677	83	180	10	6.1
	MRFCC1091S	00054-000678	91	180	10	6.6

<素材>

- アウターカバー：ポリエステル
- インナーカバー：熱可塑性ポリウレタン
- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム

