

「快適な眠りを誘う」標準マットレス
快適・衛生タイプ

Sofia CC

ソフィア CC



アウターカバー：除湿

吸水・拡散素材

除 湿 汗などの水分をすばやく吸収し、拡散させる機能

インナーカバー：防水・臭い浸透軽減

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

防 水 汚れても清拭消毒可能な特性

臭い浸透軽減 インナーのフィルムの厚み（通常品の8倍）
+ 溶着式-止水ファスナーの機能


マ ッ ト 部：快適な眠りを誘う

高耐久ポリウレタンフォーム

選べる寝心地 かたさの異なるリバーシブル構造で、オモテ面ウラ面の選択が可能

寝心地の良さと寝返りのしやすさ 頭部・足部と背中・大腿部で異なるスリット形状により、沈みこみを抑制

“へたり”にくさ 特殊なウレタンフォームで、“へたり”が発生しにくい特性

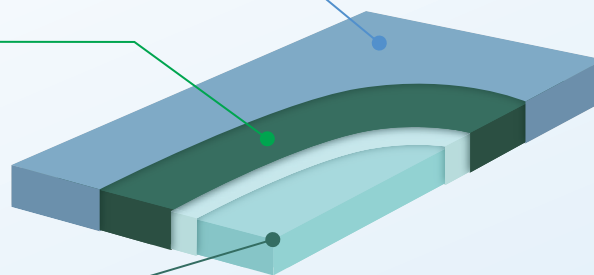

NEW

やさしい肌ざわり・サラサラ感 を提供する専用の除湿カバー

やさしい肌ざわり


厚みのある3層構造により、
綿シーツとは異なる、
やさしい肌ざわりを提供します

表面層：より細かく繊維を密集
中間層：極細繊維
裏面層：より細かく繊維を密集



水分吸収・拡散性 によるサラサラ感

カバー表面についた汗などの
水分を中間層の超極細繊維が
素早く吸収し、拡散させます
吸収した水分は表面層に戻り
にくく、サラサラで快適です

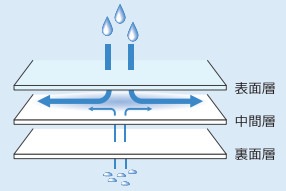


インナーカバー

マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減

インナーカバーの厚さと素材

独自開発の TPU フィルム は、従来の合成皮革製カバー
よりも厚さを8倍向上させました



フィルム厚さ（ 従来 20μ → 今回 170μ ）で内部への
臭いの浸透を軽減しました ※全周溶着式

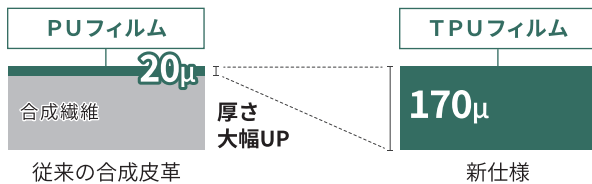

溶着式 - 止水ファスナー

一般的なファスナーは内部に液体が浸透します
止水ファスナーは内部に液体は浸透しませんが、縫製加工
の場合、針穴から浸透します

溶着式 - 止水ファスナーは、液体が内部へ侵入するのを軽減
します

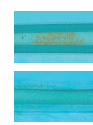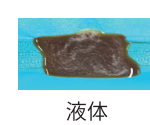


縫製式-通常ファスナー
(内部に侵入)
溶着式-止水ファスナー
(侵入なし)

マット部

快適な眠りのために


好みに合わせて選べる寝心地

かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です
やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分
けることができます

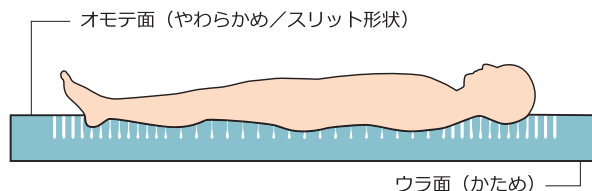

寝心地のよさと寝返りのしやすさ

頭部・足部は小さなスリットで体を
やわらかく支え、背中～大腿部は
大きなスリットで体の沈み込みを
抑えることで、寝心地のよさと寝返り
のしやすさを両立しています

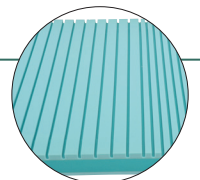

スリット形状

“へたり”にくさ

特殊なウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”を
発生しにくくしています

製品名	品番	TAISコード	マットサイズ			重量
			幅	長さ	厚さ	
ソフィア CC	MHACC1083	00054-000671	83	191	10	6.9
	MHACC1091	00054-000672	91	191	10	7.4
	MHACC1083S	00054-000673	83	180	10	6.4
	MHACC1091S	00054-000674	91	180	10	6.9

＜素材＞

- アウターカバー：ポリエステル
- インナーカバー：熱可塑性ポリウレタン
- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム

