

「快適な眠りを誘う」標準 マットレス

Sofia

ソフィア（防水・清拭消毒タイプ）

介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品

対象者 自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人

PAT.



快適な眠りのために


<好みに合わせて選べる寝心地>

かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です


やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分けことができます

<寝心地のよさと寝返りのしやすさ>

頭部・足部は小さなスリットで体をやわらかく支え、背中～大腿部は大きなスリットで体の沈み込みを抑えることで、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立しています

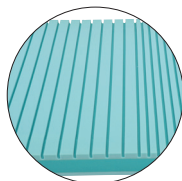

スリット形状

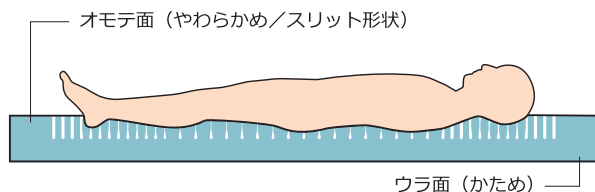

<“へたり”にくさ>

特殊なウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”を発生しにくくしています

“へたり”とは・・・

マットレスを長期間使用した場合に起こる劣化現象で、変形して元に戻らなくなり「体圧分散性能が低下」してしまいます

安全で衛生的な環境のために


<清拭消毒へのこだわり>

マットレス表面に付着した汚れは簡単に拭き取ることができ、アルコールなどで「清拭消毒」ができます



<カバーの丸洗いが可能>


専用カバーは取り外して洗濯機で丸洗いすることができます。

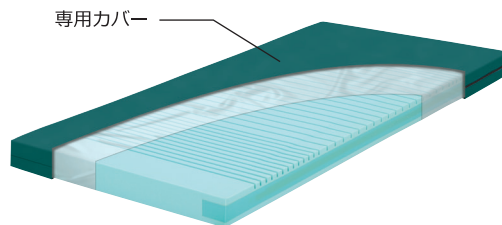

<マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減>

独自開発の TPUフィルム は、従来の合成皮革製カバーよりも厚さを8倍向上させ、内部への臭いの浸透を軽減しました

また、溶着式-止水ファスナーは、液体が内部へ侵入するのを軽減します

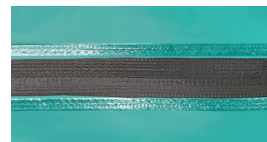

品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MHA1083A	00054-000306	83	191	10	6.3	83cm程度	レギュラー	86,394円 (税抜価格78,540円)
MHA1091A	00054-000308	91	191	10	6.8	91cm程度	レギュラー	
MHA10100A	00054-000310	100	191	10	7.3	100cm程度	レギュラー	
MHA1083SA	00054-000307	83	180	10	5.8	83cm程度	ショート	
MHA1091SA	00054-000309	91	180	10	6.3	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム
- カバー：熱可塑性ポリウレタン

