

「快適な眠りを誘う」標準マットレス

Sofia

ソフィア (防水・清拭消毒タイプ)



介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品（マットレス）

対象者 自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人

PAT.P


快適な眠りのために

<好みに合わせて選べる寝心地>


かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です。やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分けすることができます。

<寝心地のよさと寝返りのしやすさ>

頭部・足部は小さなスリットで体をやわらかく支え、背中～大腿部は大きなスリットで体の沈み込みを抑えることで、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立しています。

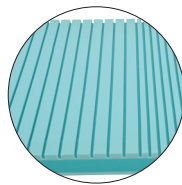

スリット形状

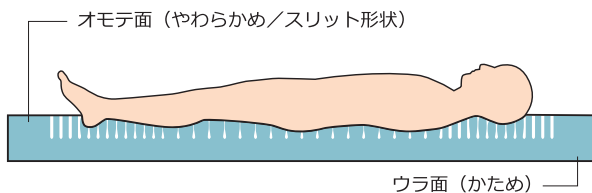

<“へたり”にくさ>

特殊な中密度高反発系ウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”を発生しにくくしています。

“へたり”とは・・・

マットレスを長期間使用した場合に起こる劣化現象で、変形して元に戻らなくなり「体圧分散性能が低下」してしまいます。

安全で衛生的な環境のために


<防水素材の表面カバーと清拭消毒へのこだわり>

完全防水のカバーとインナー保護フィルムにより、嘔吐、吐血、失禁、薬剤などの汚れがマットレス内部に浸透するのを防ぐことで、安全（感染）対策や衛生面（臭い）の対策につながります。マットレス表面に付着した汚れは簡単に拭き取ることができ、アルコールなどで「清拭消毒」ができます。



<カバーの丸洗いが可能>

専用カバーは取り外して洗濯機で丸洗いすることができます。

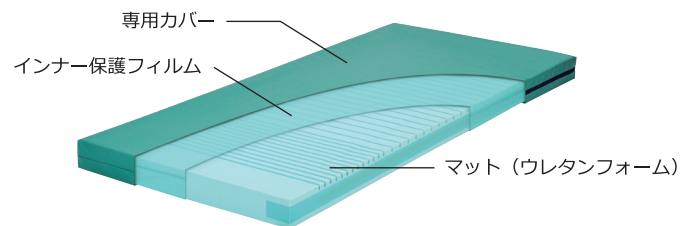

| 品番 | TAISコード | マットサイズ (cm) | | | 重量 (kg) | 適合ベッドサイズ | | 価格 |
|-----------|--------------|-------------|-----|----|---------|----------|-------|--------------------------|
| | | 幅 | 長さ | 厚さ | | 幅 | 長さ | |
| MHA1083A | 00054-000306 | 83 | 191 | 10 | 6.3 | 83cm程度 | レギュラー | 86,394円 (税抜価格78,540円) |
| MHA1091A | 00054-000308 | 91 | 191 | 10 | 6.8 | 91cm程度 | レギュラー | |
| MHA10100A | 00054-000310 | 100 | 191 | 10 | 7.3 | 100cm程度 | レギュラー | |
| MHA1083SA | 00054-000307 | 83 | 180 | 10 | 5.8 | 83cm程度 | ショート | |
| MHA1091SA | 00054-000309 | 91 | 180 | 10 | 6.3 | 91cm程度 | ショート | |

<素材>

- マット部：ウレタンフォーム
- インナー保護フィルム：EVA
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

