

「快適な眠りを誘う」標準マットレス

Sofia

ソフィア (通気・洗浄消毒タイプ)



介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品（マットレス）

対象者 自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人


快適な眠りのために

<好みに合わせて選べる寝心地>


かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です。やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分けることができます。

<寝心地のよさと寝返りのしやすさ>

頭部・足部は小さなスリットで体をやわらかく支え、背中～大腿部は大きなスリットで体の沈み込みを抑えることで、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立しています。

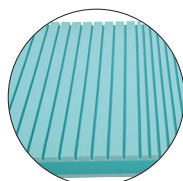

スリット形状

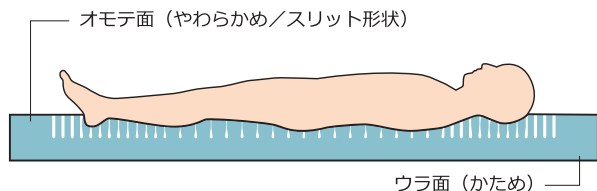

オモテ面（やわらかめ／スリット形状）

ウラ面（かため）

<“へたり”にくさ>

特殊な中密度高反発系ウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”を発生しにくくしています。


“へたり”とは・・・

マットレスを長期間使用した場合に起こる劣化現象で、変形して元に戻らなくなり「体圧分散性能が低下」してしまいます。

ムレ環境を改善

<ムレ環境を改善する通気カバー>

快適性を考慮した通気カバー。汗や水分を素早く吸収拡散し、いつもサラサラで快適な状態を保ちます。

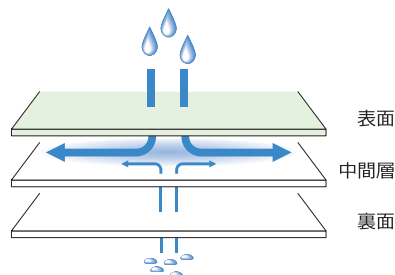


表面

中間層

裏面

<カバーの丸洗いが可能>

専用カバーは取り外して洗濯機で丸洗いすることができます。

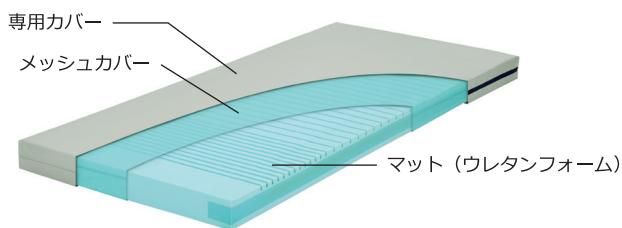

専用カバー

メッシュカバー

マット（ウレタンフォーム）

品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MHAV1083A	00054-000311	83	191	10	6.3	83cm程度	レギュラー	67,276円 (税抜価格61,160円)
MHAV1091A	00054-000313	91	191	10	6.8	91cm程度	レギュラー	
MHAV10100A	00054-000315	100	191	10	7.3	100cm程度	レギュラー	
MHAV1083SA	00054-000312	83	180	10	5.8	83cm程度	ショート	
MHAV1091SA	00054-000314	91	180	10	6.3	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：ウレタンフォーム
- インナーメッシュカバー：ポリエステル
- カバー：ポリエステル

