

「体圧分散性能」「除圧性能」を向上した 高機能エアマットレス

STAGEA

ステージア (ハイブリッドタイプ)



介護保険福祉用具貸与品：床ずれ防止用具

対象者


自分の力で寝返りができない人で、
人による体位変換が受けられる人

PAT.

体圧分散性能

上部にマイクロエアセル、下部にそれぞれのマイクロエアセルの動きに連動したフィッティング層を配置することで、体圧分散性能を向上しています。


ハイブリッド構造
(長さ方向の断面図)

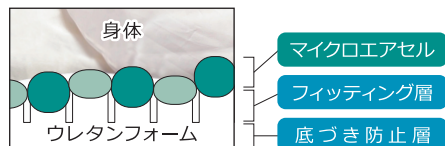

自動体圧調整


体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な体圧分散になるように自動で調整します。

体圧調整前(寝た直後)

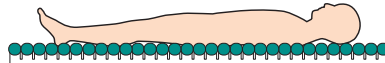



自動調整

体圧調整後(数分後)

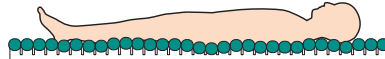

圧切替による除圧


寝心地のよさを持続させながら圧切替(除圧)を行います。身体の50%をマイクロエアセルで支え、残りの50%で除圧を行います。

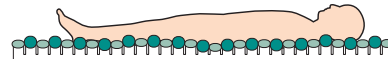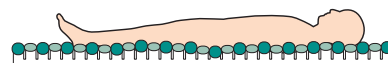


優れた『ずれ力対策』

ベッドの背上げ・背下げ時、おむつ交換、リハビリ時などには身体のさまざまな部位に苦しい圧がかかります。「背上げモード」「リハビリモード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、身体にかかる苦しさを緩和します。

背抜き動作

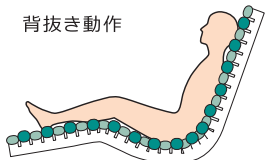


圧抜き動作

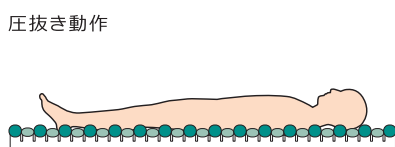


『むれ対策』と『ひえ対策』

エアマットレス特有の弱点である、寝床内の『むれ』と『ひえ』を対策します。

<むれ対策>

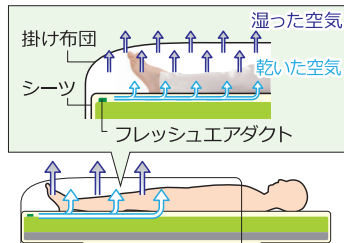

<ひえ対策>

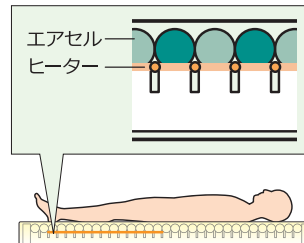

※ 冷暖房機能や湿度調整機能ではなく、完全に『むれ』や『ひえ』を除去するものではありません

TAISコード：00054-000115

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ		価格
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ	
MSTA83	83	193	13	10.0	83cm程度	レギュラー	212,960円 (税抜価格193,600円)
MSTA91	91	193	13	11.0	91cm程度	レギュラー	
MSTA83S	83	182	13	9.5	83cm程度	ショート	
MSTA91S	91	182	13	10.5	91cm程度	ショート	

<素材>

- マット部：マイクロエアセル=ウレタンフィルム、フィッティング層・底つき防止層=高耐久ポリウレタンフォーム
- カバー：ウレタン合皮(制菌加工)

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

札幌/仙台/さいたま/東京/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得