

「お知らせ機能」を搭載した 標準マットレス


Tellsa CA-WL

テルサ コール (ワイヤレス)

介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品

対象者


自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人で、
「認知症」や「せん妄」により、見守りが必要な人

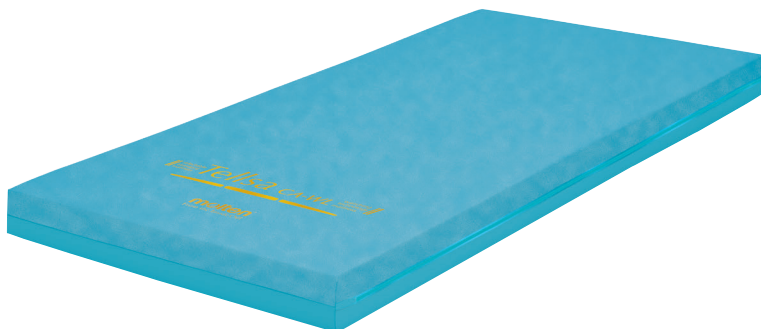

『端座位』に近い姿勢を感知してチャイムでお知らせ

● ベッドから立ち上がった際の【転倒】 ● 徘徊による【転倒・転落】 ● 異常行動による【事故】（家事をしようとしての火災、外出での交通事故）などの夜間のトラブルを未然に防ぐために、マットレスの両サイドに内蔵したセンサーが端座位になる過程での圧力変化をとらえ専用のワイヤレス受信機を通じてお知らせします
センサーを内蔵しているので、利用者様は違和感なく使用でき、断線による故障もありません

端座位での圧力変化をとらえ、離床の可能性があると判断

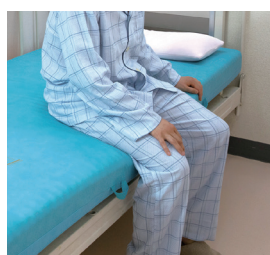

ワイヤレス受信機にお知らせ
※ 受信機は持ち運び可能

すぐに対応



確認に行こう！



優れた体圧分散性能


従来の標準マットレスよりも厚さをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上し、さまざまな利用者様とケアのニーズに対応することができます




選べる質感（リバーシブル）

身体をやさしくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます

身体をやさしくつつみ込む
【やわらか面】

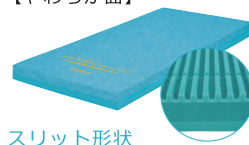

寝返りのしやすい
【しっかり面】

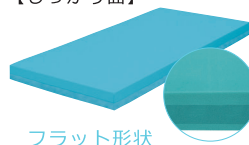

品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ	
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ
MTLSA1283SP-W	00054-000442	83	191	12	7.5	83cm程度	レギュラー
MTLSA1291SP-W	00054-000443	91	191	12	8.0	91cm程度	レギュラー
MTLSA1283SSP-W	00054-000444	83	180	12	7.0	83cm程度	ショート
MTLSA1291SSP-W	00054-000445	91	180	12	7.5	91cm程度	ショート

<素材>

- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム
- カバー：熱可塑性ポリウレタン

