

「質感が選べる」標準マットレス
快適・衛生タイプ

Tellsa CC

テルサ CC



アウターカバー：除湿

吸水・拡散素材

除 湿 汗などの水分をすばやく吸収し、拡散させる機能

インナーカバー：防水・臭い浸透軽減

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

防 水 汚れても清拭消毒可能な特性

臭い浸透軽減 インナーのフィルムの厚み（通常品の8倍）
+ 溶着式-止水ファスナーの機能


マ ッ ト 部：質感が選べる

高耐久ポリウレタンフォーム

優れた体圧分散性能 従来品よりも厚さをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上

選べる質感 身体をやさしくつつみ込む【やわらか面】と寝返りのしやすい【しっかり面】の選択が可能

端座位の安定性 両サイドに、かためのウレタンフォームを埋め込むことで安全な立ち上がりをサポート

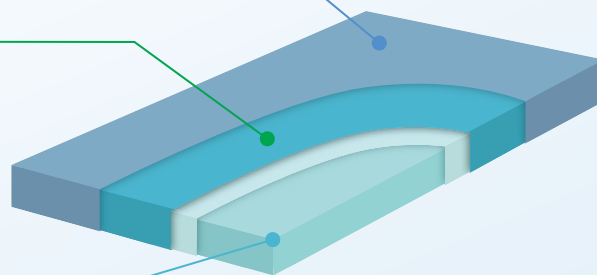

NEW

やさしい肌ざわり・サラサラ感 を提供する専用の除湿カバー

やさしい肌ざわり


厚みのある3層構造により、
綿シーツとは異なる、
やさしい肌ざわりを提供します

表面層：より細かく繊維を密集
中間層：極細繊維
裏面層：より細かく繊維を密集



水分吸収・拡散性 によるサラサラ感

カバー表面についた汗などの
水分を中間層の超極細繊維が
素早く吸収し、拡散させます
吸収した水分は表面層に戻り
にくく、サラサラで快適です

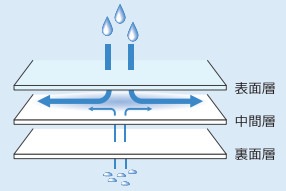


インナーカバー

マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減

インナーカバーの厚さと素材

独自開発の TPUフィルム は、従来の合成皮革製カバー
よりも厚さを8倍向上させました


フィルム厚さ（ 従来 20μ → 今回 170μ ）で内部への
臭いの浸透を軽減しました ※全周溶着式

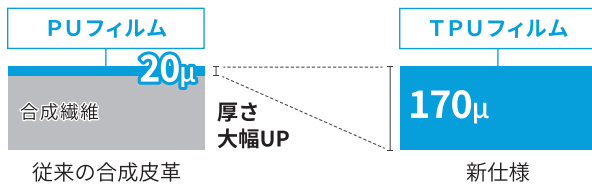

溶着式 - 止水ファスナー

一般的なファスナーは内部に液体が浸透します
止水ファスナーは内部に液体は浸透しませんが、縫製加工
の場合、針穴から浸透します

溶着式 - 止水ファスナーは、液体が内部へ侵入するのを軽減
します

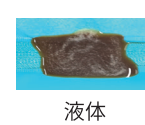

縫製式-通常ファスナー
(内部に侵入)
溶着式-止水ファスナー
(侵入なし)

マット部

選べる質感

優れた体圧分散性能

従来品よりも厚さをもたせることで、体圧分散
性能と質感が向上し、さまざまな利用者様と
ケアのニーズに対応することができます

厚さ
12cm

端座位の安定性


マットレスの両サイドに、よりかための
ウレタンフォームを埋め込むことで、
端座位が安定し、安全な立ち上がりを
サポートします



選べる質感

<リバーシブルによる選択>

身体をやさしくつつみ込む
【やわらか面】

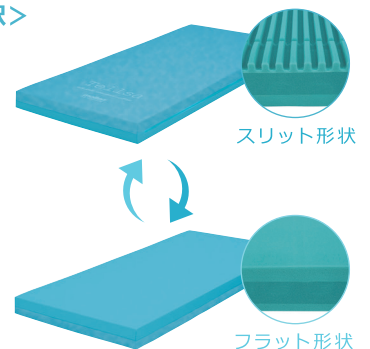

寝返りのしやすい
【しっかり面】

製品名	品番	TAISコード	マットサイズ			重量
			幅	長さ	厚さ	
テルサ CC	MTLSCC1283	00054-000667	83	191	12	7.4
	MTLSCC1291	00054-000668	91	191	12	7.9
	MTLSCC1283S	00054-000669	83	180	12	6.9
	MTLSCC1291S	00054-000670	91	180	12	7.4

<素材>

- アウターカバー：ポリエステル
- インナーカバー：熱可塑性ポリウレタン
- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム

