

「質感が選べる」標準マットレス

# Tellsa

テルサ (防水・清拭消毒タイプ)



介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品（マットレス）

**対象者** 自分で動ける人 ～ 一部介助が必要な人

PAT.


## 優れた体圧分散性能

従来の標準マットレスよりも厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上し、さまざまな利用者様とケアのニーズに対応することができます。



## 選べる質感

身体全体をやさしくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます（リバーシブル）

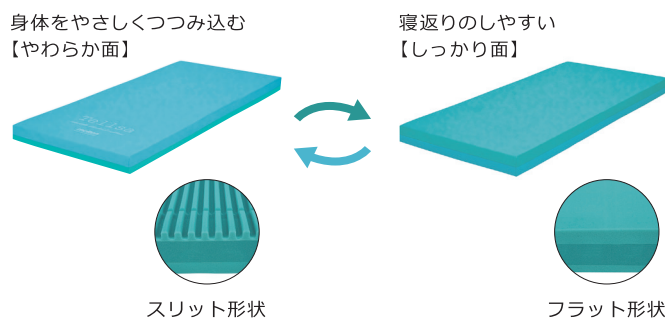

## 端座位の安定性

マットレスの両サイドに、よりかためのウレタンフォームを埋め込むことで、端座位が安定し、安全な立ち上がりをサポートします。



## 安全で衛生的

嘔吐、吐血、失禁、薬剤などの汚れが内部に浸透するのを防ぐことで、安全（感染）対策や衛生面（臭い）の対策につながります。マットレス表面に付着した汚れはアルコールなどで「清拭消毒」ができます。



品番	TAISコード	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ	
		幅	長さ	厚さ		幅	長さ
MTLS1283	00054-000203	83	191	12	6.8	83cm程度	レギュラー
MTLS1291	00054-000204	91	191	12	7.3	91cm程度	レギュラー

<素材>

- マット部：ウレタンフォーム
- インナー保護フィルム：EVA
- カバー：ウレタン合皮（制菌加工）

開発・製造  
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

[www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京／札幌／仙台／さいたま／名古屋／大阪／広島／福岡



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得