

圧迫力・ずれ力・むれを対策した快適で安全な車いす用クッション

SEAPOS

シーポス




介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援

対象者 車いすや座位の姿勢で長時間過ごす人

1. 圧迫力・ずれ力の対策と快適な座位

身体が前に動いた時に圧迫される尾骨部をクッション中央部に設けた溝で逃がし、圧迫力を取り除くと同時にずれ力の発生を防止します。また、ゲルとウレタンフォームの2層構造により坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減します。

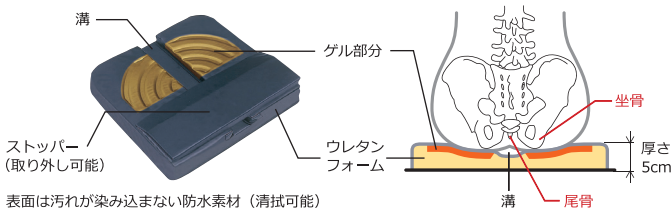

<シーポス>

| カラー | 品番 | TAIS コード | サイズ (cm) | | | 重量 (kg) | 価格 |
|------|-------|--------------|----------|----|---------------|------------|--------|
| | | | 幅 | 長さ | 厚さ | | |
| ブルー | MSPBL | 00054-000030 | 40 | 40 | 5 (最厚部7cm) | 1.0 | オープン価格 |
| オレンジ | MSPOR | | | | | | |

2. 身体のずり落ち対策と安全な座位保持

体型に合わせて調整できるクッション前部のストッパーで、身体のずり落ちを低減します。ストッパーは前後に3cm調整でき、取り外しも可能です。

カバー裏面には滑り止め加工を施し、車いすの座面上でクッションが移動するのを防ぎます。

3. 立体構造カバーによるむれ対策

表面に通気孔を設けた立体構造カバーは通気性に優れ、むれを対策します。取り外して洗濯することもできます。

<シーポスJr. (ジュニア) > ※ ゲル素材なし、ストッパー一体型

| カラー | 品番 | TAIS コード | サイズ (cm) | | | 重量 (kg) | 価格 |
|------|--------|--------------|----------|----|---------------|------------|--------|
| | | | 幅 | 長さ | 厚さ | | |
| グレー | MSPJGR | 00054-000030 | 40 | 40 | 5 (最厚部7cm) | 0.7 | オープン価格 |
| イエロー | MSPJY | | | | | | |

<素材> ●クッション部：ポリスチレンゲル、ウレタンフォーム
●クッション表皮：ウレタン合皮 ●カバー表面：ポリエステル
●カバー裏面：ナイロン+ポリウレタン (滑り止め加工)

<素材> ●クッション部：ウレタンフォーム
●クッション表皮：ウレタンフィルム
●カバー表面：ポリエステル ●カバー裏面：アクリル (滑り止め加工)

関連製品 ～ 車いす用クッション ～

「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減する車いす用クッション

Power Cushion パワークッション



体圧分散性能 自動体圧調整 除圧性能

ノーマルタイプ

左右の姿勢の崩れを防ぐための車いす用クッション

SEAPOS ELEF シーポス エレフ



姿勢保持

