

突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直型手すり

Buddy

バディー

介護保険福祉用具貸与品：手すり 障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 「立つ・座る」「歩行」「立位保持」に不安のある人






1. 工事不要の簡単設置

2. 突っ張ることでの強度安全性による安心感


天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。

3. 梁のある天井であれば、どこでも設置可能

●設置場所に合わせて5つのタイプが選べます。 ●部屋の壁や角に寄せた設置も可能 ●対応天井高さ：1.9～2.8m

<p>①</p>  <p>■十字型ストッパー 梁の位置を気にせずどこでも設置可能</p> <p>天井への負担が少なく、梁を確実にとらえる安定感抜群の標準ストッパーです。</p>	<p>②</p>  <p>■I型ストッパー 壁ぎわや部屋の端への設置に最適</p> <p>壁と手すりの距離 約8cm</p>	<p>③</p>  <p>■丸型ストッパーS 狭い場所や部屋の角(隅)への設置に最適</p> <p>壁と手すりの距離 約8cm</p>	<p>④</p>  <p>■I型ストッパー2ヶ 壁(端)にぴったり付けたい場合に最適</p> <p>壁と手すりの距離 約4cm</p>	<p>⑤</p>  <p>■コーナーストッパー 部屋の角(隅)にぴったり付けたい場合に最適</p> <p>壁と手すりの距離 約4cm</p>
---	---	--	--	---

必ず梁の場所に設置してください。

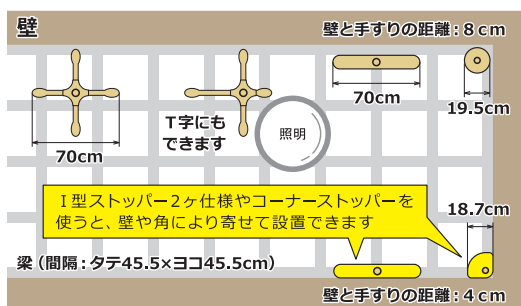

浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

部屋の壁(端)や角(隅)にぴったり付けた複数本連結も可能



●I型ストッパー2ヶ仕様とコーナーストッパー仕様を使った連結

- 品番：①十字型ストッパー仕様=MNTCM、②I型ストッパー仕様=MNTCMIS、③丸型ストッパー仕様=MNTCMRCS
④I型ストッパー2ヶ仕様=MNTCMISW、⑤コーナーストッパー仕様=MNTCMCRS
- TAISコード：①～③ 00054-000054、④ 00054-000468、⑤ 00054-000467
- サイズ：対応天井高さは1.9～2.8m、収納サイズ=1.81m、グリップ直径=3.65cm ●重量：①7.1kg、②6.6kg、③5.7kg、④7.4kg、⑤5.6kg ●素材：主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂、グリップカバー=オレフィン系エラストマー
- ※I型ストッパー2ヶ仕様は、必ず壁(端)にぴったり付けて使用してください。
- ※コーナーストッパー仕様は、部屋の角(隅)以外には使えません。バディー専用オプションの各種サイドバーを取り付けての使用はできません。

価格

55,660円
(税抜価格50,600円)

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー


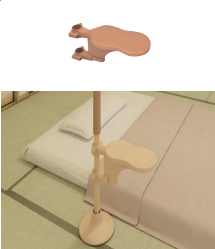

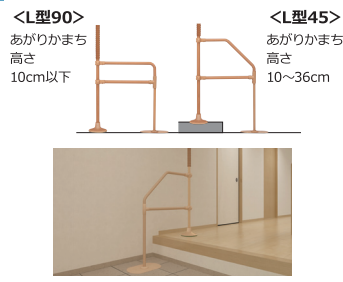


株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001認証取得
ISO13485認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得

<p>立つ・座るの動作や寝返りをサポート</p> <p>サイドバーHS</p>  <p>しっとり、やわらか、温かい、新感覚のグリップ</p>	<p>手すり为抓手り握れない人の立つ・座るの動作をサポート</p> <p>丸型サイドバー</p>  <p>手のひらや肘で身体を支えられる形状</p>	<p>もたれかかることで立ったままの姿勢保持をサポート</p> <p>立位保持パッド</p>  <p>回転防止機能付きのクッション材</p>	<p>玄関での立つ・座る、段差を昇る・降りるの動作をサポート</p> <p>L型サイドバー</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><L型90></p> <p>あがりかまち高さ 10cm以下</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><L型45></p> <p>あがりかまち高さ 10~36cm</p> </div> </div>  <p>段差の高さに合わせて調整可能</p>	<p>廊下などの長い距離の歩行をサポート</p> <p>クロスバー</p> <p>ルーツシリーズと連結する場合は、クロスバー取り付けブラケットを使用してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><固定式></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><跳ね上げ式></p>  </div> </div> <p>複数本を繋ぐことも可能</p>
---	--	--	---	--

種類	サイドバーHS	丸型サイドバー	立位保持パッド
品番	MNTCMM01LB	MNTCM05	MNTC08
TAISコード	00054-000412	00054-000064	00054-000067
サイズ(cm)	幅26×長さ19.5 直径4.9×3.9(楕円)	幅15×長さ28	幅50×直径12
重量(kg)	0.8	1.5	0.5
素材	スチレン系エラストマー	オレフィン系エラストマー	カバー=合成皮革、 中身=ウレタン
価格	14,520円(税抜価格13,200円)	21,780円(税抜価格19,800円)	11,495円(税抜価格10,450円)





種類	L型サイドバー	
タイプ	L型90	L型45
品番	MNTCM06	MNTCM07
TAISコード	00054-000065	00054-000066
サイズ(cm)	全長76×全高75、直径3.5	全長76×全高100、直径3.5
あがりかまち高さ	10cm以下	10~36cm
重量(kg)	3.1	3.5
素材	主材=スチールパイプ、表面=軟質樹脂、ベース部=スチール	
価格	32,670円(税抜価格29,700円)	

種類	クロスバー <固定式セット>			クロスバー <跳ね上げ式セット>		
	幅	品番	TAISコード	品番	TAISコード	価格
	40cm	MNTCM03BE004	00054-000337	MNTCM02BE004	00054-000331	23,595円(税抜価格21,450円)
	60cm	MNTCM03BE006	00054-000338	MNTCM02BE006	00054-000332	24,805円(税抜価格22,550円)
	90cm	MNTCM03BE009	00054-000339	MNTCM02BE009	00054-000333	26,015円(税抜価格23,650円)
	1.2m	MNTCM03BE012	00054-000340	MNTCM02BE012	00054-000334	26,620円(税抜価格24,200円)
	1.6m	MNTCM03BE016	00054-000341	MNTCM02BE016	00054-000335	27,830円(税抜価格25,300円)
	2.0m	MNTCM03BE020	00054-000342	MNTCM02BE020	00054-000336	30,250円(税抜価格27,500円)
直径(cm)	3.5					
素材	主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂					

種類	クロスバー 取り付けブラケット
形状	
品番	MNTCM03TB
TAISコード	00054-000228
素材	ナイロン樹脂
価格	7,018円 (税抜価格6,380円)

花や観葉植物を飾るための オプション品 (介護保険対象外)

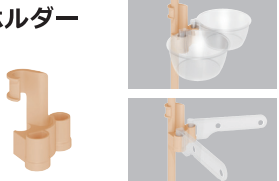手すりを使った「優しい空間」づくりをご提案します

<p>ホルダー</p>  <p>1つのホルダーで トレイやフックが2個取り付け可能</p>	<p>トレイ</p>  <p>植木鉢のサイズや個数に あわせて使い分け可能</p>	<p>フック</p>  <p>吊り下げ式の観葉植物を飾ることが可能</p>	<p>ライト</p>  <p>手すりに近づくと自動的に点灯</p>
---	---	--	---

種類	ホルダー	トレイS ※ホルダーは別売り	トレイL ※ホルダーは別売り	フック ※ホルダーは別売り
品番	MNTCMM30	MNTCMM31	MNTCMM32	MNTCMM33
サイズ(cm)	幅13×長さ11×高さ14	幅21×長さ23×高さ9	幅23×長さ40×高さ9	幅3×長さ31×高さ7
重量(kg)	0.16	0.26	0.46	0.08
素材	ABS樹脂			
価格	2,420円(税抜価格2,200円)	2,420円(税抜価格2,200円)	3,025円(税抜価格2,750円)	2,420円(税抜価格2,200円)

種類	ライト
品番	MNTCMM34
サイズ(cm)	幅4×長さ16.5×奥行3.7
重量(kg)	0.16
感知方式	焦電型赤外線人感センサー
価格	3,630円(税抜価格3,300円)