

行きたいところへ行ける
動線づくりのための 屋内用歩行車

Small & Light !

Escoto

エスコート



介護保険福祉用具貸与品：歩行器

対象者 1. 自分で立てる人 / 一部サポートで立てる人 2. 何かにつかまれば自分で歩ける人

PAT.P

抜群の「操作性」を実現！ 「片手歩行を希望する人」にも最適！

1. 超軽量3.0kgの効果

- ① 段差や方向転換の際には軽い力で持ち上げることができます。片まひの人や片手歩行を希望される人にも最適です。
- ② 車への積み込みもらくらくです。



2. 旋回性と直進性を両立

- ① コンパクト(幅：51.5cm×奥行：53cm)で、体の近くで歩行車を操作できる設計のため、せまいスペースでの旋回に優れています。
- ② 前輪は「360度回転」と「直進固定」に切り替えられる大きめのキャスター、後輪は固定式キャスターです。

3. 立ち上がりのしやすさ


エスコートを使い、ベッドや椅子から立ち上がりができます。
好きな場所に移動し立ち上げられる「動く手すり」とお考えください。



ロック



手を乗せたまま前傾で
おしりを上げてください

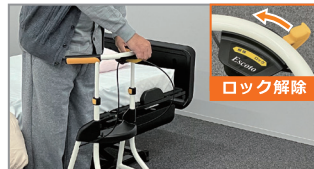

ロック解除

立ち上がりが終わると
駐車ブレーキのロックを解除します



両手でグリップを握って
ゆっくり歩き出します

4. ハンドルが握れない人に配慮したウォーキングプレート エスコート wp

手のひらをウォーキングプレートに置いて
押しながら進むことができます。



エスコート

▶
ウォーキング
プレート装着




エスコート wp



5. ハンドル高さ調整 5段階

利用者様の身体状況や歩行姿勢に合わせて、
簡単にハンドルの高さを変えることができます。
最初にご希望の高さに設定してご使用ください。

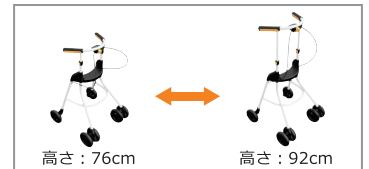

高さ：76cm

高さ：92cm

タイプ	品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(kg)	素材	価格
			幅	奥行	高さ			
エスコート	MESCP	00054-000612	51.5	53	76/80/84/88/92	3.0	アルミニウム合金、 樹脂	オープン価格
エスコート wp	MESCPW	00054-000613				3.5		

※ 最大使用者体重：80kg

開発・製造
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health

東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの
設計、製造および付帯サービスにて取得