

玄関先での行動範囲を広げる  
床置き型手すり

# Roots way

ルーツ ウェイ

PAT.P



介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具

## Roots way はこのような場面にオススメです

### 1. 対象者の状態

自分で歩けるが、つまづきやすい  
何かにつかまれば段差を越えられる

### 2. 環境

玄関まわりに段差や階段がある

### 3. 手すりを使う目的

転倒リスクの回避、利用者様本人の安心感

### 4. 特徴 (Roots way の選定理由となる取り扱い性と安全性)

**安全・安心対策** 以下の①～③の理由

- ① ぐらつきを減少させるプレートと支柱の強度設計／連結プレート構造  
② 歩行を確実にキャッチするためのプレート枚数      ③ 足がひっかかりにくい支柱のオフセット形状

①



手すりを持った時に  
左右や前後にぐらつきにくい




連結プレートは  
段差にも設置可能

②



歩幅に合わせてプレートがあるので  
凹凸や踏み心地の違いがなく歩きやすい

③

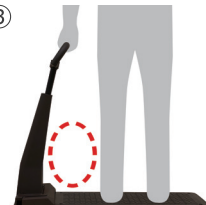

足が支柱に  
接触しにくい



平らな場所や、階段などさまざまな  
玄関先に対応できます

## 住居の環境で長さ・高さ・角度が調整可能

- ① 利用者様の歩行距離にあわせて手すり部分の長さ調整可能  
② 利用者様の腰の高さにあわせて手すり部分の高さ調整可能  
③ 壁や柱など障害物をよけて設置可能(傾き 45度まで)

① 長さ調整



② 高さ調整



③ 角度調整(上下・左右)



**Roots way は長さが 100cm～164cm、170cm～265cm でほぼ途切れなく設置可能です!**

ルーツ ウェイ(フルセット) ●品番：MNTPOW6 ●TAISコード：00054-000496  
●サイズ：フラット設置時＝全長 100～265×全幅 106×全高 74～88cm、ベースプレート＝幅 106×奥行 30cm、  
手すり部直径＝3.5cm、伸縮手すり長さは(A)53～69cm (B)69～85cm (C)85～101cm (D)101～117cm  
●重量：90kg ●素材：手すり部＝アルミ＋樹脂、支柱＝鉄＋アルミ＋樹脂、ベースプレート＝鉄＋塗装＋樹脂カバー

価格

283,140円  
(税抜価格257,400円)

開発・  
販売元  
製造

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京／札幌／仙台／さいたま／名古屋／大阪／広島／福岡



ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの  
設計、製造および付帯サービスにて取得

利用者様のご希望や玄関先の環境に合わせて  
選べるオプション

# Roots way

## ルーツ ウェイ

PAT.P




介護保険福祉用具貸与品：手すり

障がい者総合支援・日常生活用具


### 手すり部のカラーバリエーション（オプション）

利用者様のご希望に応じて、手すり部分だけ変えれば簡単に色の変更ができます


落ち着いたある【標準カラー】

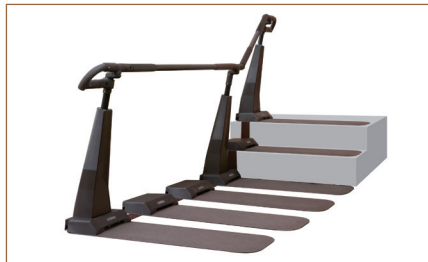

中間色の【ブラウン】（オプション）

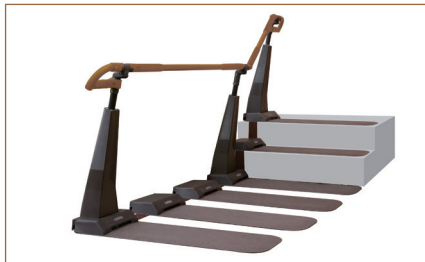

明るめの【ベージュ】（オプション）

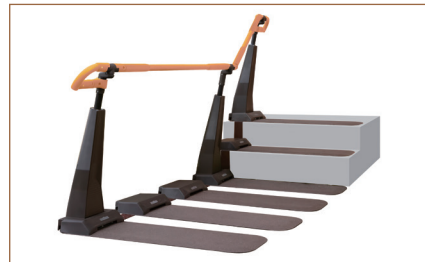


### 玄関により近い場所から使える長めのグリップ（オプション）

玄関を出てすぐに手すりを使いたい  
利用者様のために、より長いタイプの  
エンドグリップを用意しています

両端の手すりを変えるだけで  
安心してお使いいただけます



エンドグリップ（標準）

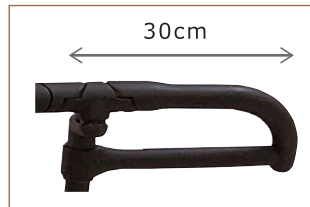

エンドグリップロング（オプション）

	品 番						価格
	伸縮手すり A	伸縮手すり B	伸縮手すり C	伸縮手すり D	エンドグリップ	エンドグリップロング	
標準カラー	MNTPOWGA	MNTPOWGB	MNTPOWGC	MNTPOWGD	MNTPOWEGS	MNTPOWEG	オープン価格
ブラウン	MNTPOWGABR	MNTPOWGBBR	MNTPOWGCBR	MNTPOWGDBR	MNTPOWEGSBR	MNTPOWEGBR	
ベージュ	MNTPOWGABE	MNTPOWGBBE	MNTPOWGCBE	MNTPOWGDBE	MNTPOWEGSBE	MNTPOWEGBE	

開発・製造  
販売元

医療・福祉機器 総合メーカー

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部 [www.molten.co.jp/health](http://www.molten.co.jp/health)

東京／札幌／仙台／さいたま／名古屋／大阪／広島／福岡



ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの  
設計、製造および付帯サービスにて取得

様々な自然環境の中で  
この手すりを使っていただくための工夫

# Roots way

ルーツ ウェイ

介護保険対象外：付属品



このような場面で外出できないことはありませんか？

## 自然環境で手すりが使えず目的が果たせないケース

寒い日、凍結や積雪で路面が歩けない、滑るため危険




モルテンの屋外でも使える手すりは、紫外線・熱・雨・ほこりなどに対し、耐久性を高めています  
しかし、凍結や積雪で路面が歩けなくなると、手すり本体の利用価値はなくなります  
手すりをさまざまな環境で使っていただくために、以下の付属品を用意しています



### 【凍結の対策】滑り止めゴムプレート（介護保険対象外）

凍結は、0℃以上の時に雨が降って  
時間とともに氷点下になり、地面に  
たまった水分が凍ることで起きます

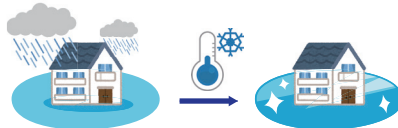

滑りにくい  
表面の凹凸形状



メーカー希望小売価格

オープン価格

#### 【滑り止めゴムプレートの効果】

- ① ゴムプレートの下に水分が流れやすい構造のため、凍結しにくい
- ② 表面の凹凸の形状により、滑りにくい
- ③ ゴムのやわらかい質感(クッション性)により、足にやさしい



### 【積雪の対策】ロードヒーティング機能（介護保険対象外）

ゴムのプレートにヒーターを組み込んだ  
【ヒーターセットプレート】をベースプレート  
に取り付けることで積雪を解消し、冬場でも  
安全な通路を確保できます



標準状態



ヒーター取り付け状態



メーカー希望小売価格

ヒーターセットプレート（センサー付き）

6枚セット 159,720円  
(税抜価格145,200円)

#### 【取り扱い】

- ・ヒーター電源は家屋の屋外用コンセントに接続してください
- ・気温と雪を感知する環境センサーを装着することで自動でヒーターが作動します
- ・電気代は1枚あたり 1.8円/1時間 です

ではなぜ、手すり部に凍結や積雪の対策を施していないのか？ 寒い日は手袋をされていて素手で直接手すりをつかまない、また手すりの断面形状からしても雪がそれほど残ることはない想定し、まずは凍結や積雪で危ない足元から対策しました

